

Manual de Instrucciones

HI190M - HI200M

HI 300N - HI 301N

HI302N - HI303N


HI304N - HI 310N

HI311N - HI312N

HI313N - HI314N

HI322N - HI324N

Agitadores Magnéticos

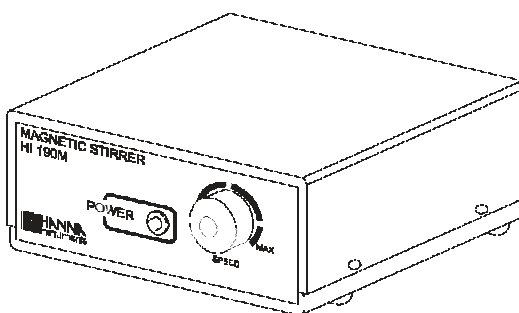

Estimado cliente,
 Gracias por elegir un producto Hanna.
 Sírvase leer este manual de instrucciones detenidamente antes de
 usar el medidor para, de ese modo, tener toda la información
 necesaria para utilizar el mismo correctamente.

cumplen con las directrices de la **CE** EN 50081-1, EN 50082-1 y EN
 61010-1.

INDICE

INSPECCION PRELIMINAR	3
DESCRIPCION GENERAL	3
GUIA DE APLICACION	5
CONEXIONES ELECTRICAS	6
DESCRIPCION DE FUNCIONAMIENTO Y ESPECIFICACIONES	7
HI190M & HI200M	8
HI300N & HI310N	10
HI301N & HI311N	12
HI302N & HI312N	14
HI303N & HI313N	16
HI304N & HI314N	18
HI322N & HI324N	20
GUIA DE FUNCIONAMIENTO PARA HI190M, HI200M, HI300N & HI310N	22
GUIA DE FUNCIONAMIENTO PARA HI301M, HI303M, HI311N & HI313N	24
GUIA DE FUNCIONAMIENTO PARA HI302N, HI304N, HI312N & HI314N	26
GUIA DE FUNCIONAMIENTO PARA HI322N & HI324N	28
ACCESORIOS	30
GARANTIA	30
DECLARACION DE CONFORMIDAD CE	31

INSPECCION PRELIMINAR

Desembale el instrumento y realice una inspección minuciosa para asegurarse de que no se han producido daños durante el transporte. Si hay algún desperfecto notifíquelo a su distribuidor inmediatamente.

Nota: Guarde todo el material de embalaje hasta estar seguro de que el instrumento funciona correctamente. Todo elemento defectuoso ha de ser devuelto en el embalaje original junto con los accesorios suministrados.

DESCRIPCION GENERAL

Las series de agitadores electromagnéticos de sobremesa de Hanna están diseñados para agitar y mezclar soluciones con facilidad en una amplia gama de aplicaciones en laboratorio. Disponemos de dieciocho modelos en una extensa gama que cubre:

- mini-agitadores
- agitadores para fines generales
- gama doble velocidad
- agitador con inversión ciclo
- indicación de rpm
- control temporizador
- velocidad constante con control de realimentación

Todos los modelos usan un imán motriz para hacer girar una barilla agitadora que produce un flujo de rotación vortex forzado en la solución con una velocidad angular constante que se puede ajustar mediante mando de velocidad externo.

A diferencia de los agitadores convencionales, todos los agitadores de Hanna usan el concepto de propulsión por impulsos para dar la potencia total requerida para agitar el fluido sin tener en cuenta la velocidad. Esto elimina la

necesidad de arrancar el motor a gran velocidad y el usuario puede controlar la velocidad con precisión.

Cada agitador va equipado con un sensor óptico que controla la velocidad y un circuito limitador de velocidad que evita operaciones peligrosas cuando se retira la carga repentinamente.

La potencia necesaria para agitar un fluido eficazmente se ve afectado por la carga de torsión en el agitador que depende de la capacidad, tipo y viscosidad del fluido. La velocidad del agitador se reduce según aumenta la carga de torsión y vice versa, a menos que la potencia suministrada cambie en concordancia.

En el caso de fluidos Newtonianos como el agua, la viscosidad permanece constante durante el agitado. Los agitadores mini y normal son ideales para fluidos Newtonianos.

Los mini-agitadores (series HI 30XN) cubren hasta 2,5 litros.

La viscosidad de algunos fluidos como el aceite y la arcilla cambia durante el proceso de agitado y es necesario ajustar la potencia para mantener una velocidad constante durante el agitado.

Los Agitadores de Velocidad Automática de Hanna (series HI 31X) están diseñados con control de realimentación automática para mantener la velocidad constante cuando la carga de torsión cambia y son por lo tanto ideales para agitar fluidos no-Newtonianos en los que la viscosidad cambia durante el agitado.

También son ideales para mezclar aplicaciones donde una solución se añade a otra lo que cambia la capacidad y por lo tanto la carga de torsión en el agitador.

Los agitadores con velocidad automática mantienen una velocidad de agitado constante durante el mezclado hasta la capacidad total de 5 litros. También pueden usarse con fluidos Newtonianos hasta una capacidad de 5 litros.


Cada agitador va equipado con barilla agitadora magnética recubierta de Teflon®.

GUIA DE APLICACIONES

APLICACION	MODELO
Fluídos Newtonianos hasta 1 litro	HI 190M HI 200M
Fluídos Newtonian hasta 2.5 litros	HI 300N HI 301N HI 302N HI 304N
Fluídos No-Newtonianos hasta 5 litros cuya viscosidad cambia durante el agitado o fluídos Newtonianos hasta 5 litros o operaciones de mezclado en las que la carga cambia durante el agitado.	HI 310N HI 311N HI 312N HI 313N
Agitado repetitivo en fluídos Newtonianos hasta 2.5 litros	HI 300N
Agitado repetitivo en muestras múltiples con misma velocidad de agitado.	HI 304N HI 314N
Aplicación de agitado rutinaria con un tiempo predeterminado de agitado	HI 322N
Agitado repetitivo en muestras múltiples con la misma velocidad de agitado y tiempo de agitado predeterminado.	HI 324N

CONEXIONES ELECTRICAS

MINI-AGITADORES HI 190M Y HI 200M

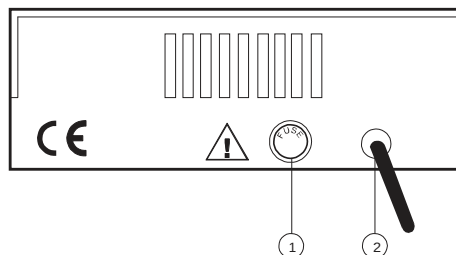


1. Portafusibles para fusible de 200 - 250 V
2. Cordón alimentación CA.

⚠ Desconecte los agitadores de la corriente antes de sustituir el fusible.

Nota: HI 190M y HI 200M no van equipados con interruptor ON/OFF. Se conectan cuando hay una entrada de corriente.

TODOS LOS DEMAS MODELOS

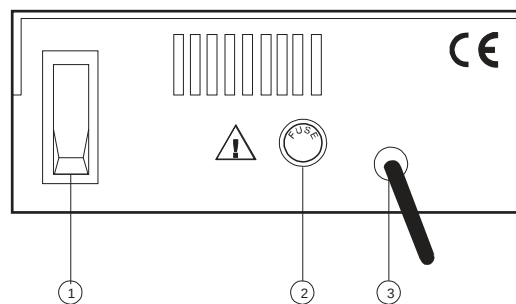

1. Interruptor ON/OFF para suministro energía.
2. Portafusibles para fusible de 200 - 250 V
3. Cordón alimentación CA.

⚠ Desconecte los agitadores de la corriente antes de cambiar el fusible.

DESCRIPCION DE FUNCIONAMIENTO Y ESPECIFICACIONES

Consulte las siguientes páginas para especificaciones de cada modelo. La capacidad tiene como referencia el agitado de agua con una viscosidad de 0.001 N·s/m² a 25°C.

Especificaciones para todos los modelos:

Velocidad	ON/OFF y Control variable continuamente con mando potenciómetro.
Propulsión	Propulsión directa con Motor de CC con imán
Consumo corriente	4W
Torsión Efectuada	85 g·cm
Alimentación	100/115/240VCA, 50/60 Hz dependiendo de los modelos
Fusible	200 mA (HI 190M y HI 200M solo) o 400 mA (todos los demás mod.); 20x5 mm (LxØ)
Barilla Agitadora	Imán revestido de Teflon® 25x7 mm (LxØ) (HI 190M y HI 200M solo); 50x7 mm (LxØ) (todos los demás modelos).



HI190M & HI200M

MINI-AGITADORES

HI190M Y HI 200M son mini-agitadores compactos de 1 litro de capacidad adecuados para su uso en mesas de laboratorio.

HI 190M va recubierto de un revestimiento a prueba de golpes y productos químicos.

HI 200M va recubierto con una capa de acero inoxidable para protección anti-corrosión.

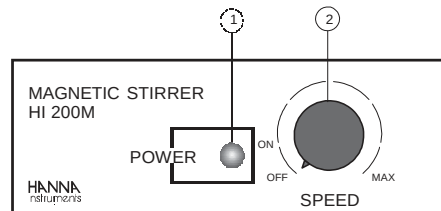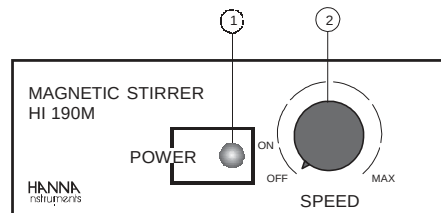



1. **Indicación de Alimentación** (Al conectarlo se ilumina el indicador LED)
2. **Botón SPEED** (para ajuste de rpm con ON/OFF) variable continuamente hasta el máximo.

	HI190M HI200M
Capacidad máxima de agitado	1 Litro
Rango Velocidad Min. Max.	100 rpm 800 a 1000 rpm
Alimentación HI190M/U HI190M/D HI200M/U HI200M/D	110/115V, 50/60 Hz 220/240V, 50/60 Hz 110/115V, 50/60 Hz 220/240V, 50/60 Hz
Categoría Instalación	II
Material recubrimiento HI190M HI200M	Plástico ABS Acero Inoxidable AISI 316
Entorno	0 a 50°C 95% RH max.
Dimensiones	120 x 120 x 45 mm
Peso HI190M HI200M	640 g 712 g

HI300N & HI310N **AGITADORES USO GENERAL**

Estos agitadores para uso general son adecuados para aplicaciones diarias de agitado en laboratorio.

HI 300N agitador normal y **HI 310N** agitador de velocidad automática están recubiertos con una capa de acero inoxidable anti-corrosión.

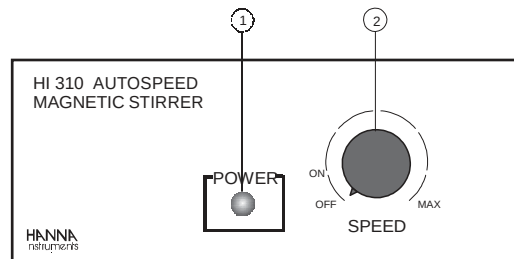
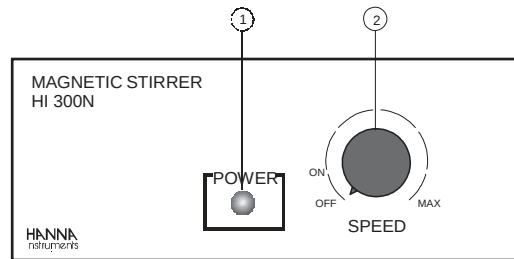


1. **Indicación de Alimentación** (Al conectarlo se ilumina el indicador LED)
2. **Botón SPEED** (para ajuste de rpm con ON/OFF) variable continuamente hasta el máximo.

	HI300N	HI310N
Capacidad máxima de agitado	2.5 Litros	5 Litros
Rango Velocidad Min. Max.	100 rpm 800 a 1000 rpm	
Velocidad Automática	no aplicable	standard
Alimentación HI300N/U HI300N/D HI310N/U HI310N/D	110/115V, 50/60 Hz 220/240V, 50/60 Hz 110/115V, 50/60 Hz 220/240V, 50/60 Hz	
Categoría Instalación	II	
Material recubrimiento	Acero Inoxidable AISI 316	
Entorno	0 a 50°C 95% RH max.	
Dimensiones	180 x 180 x 70 mm	
Peso	1.6 Kg	

HI301N & HI311N **AGITADORES DE DOS VELOCIDADES**

HI 301N agitador normal y **HI 311N** agitador velocidad automática, son ideales para agitación de larga duración que requiera velocidad lenta y control de velocidad preciso (por ejemplo en aplicaciones de electrólisis). El rango HIGH/LOW permite fijar la velocidad con precisión.

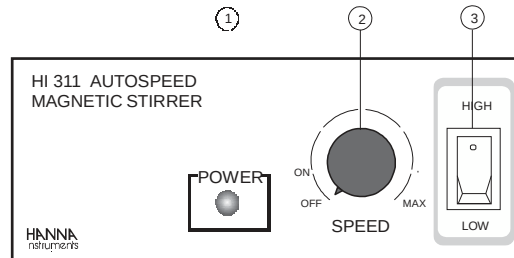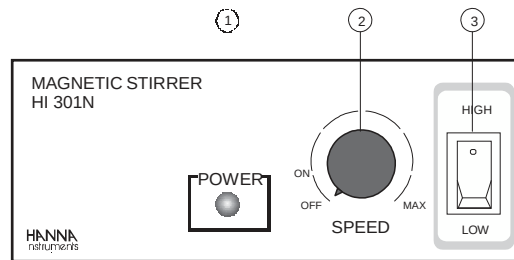


1. **Indicación de Alimentación** (Al conectarlo se ilumina el indicador LED)
2. **Botón SPEED** (para ajuste de rpm con ON/OFF) variable continuamente hasta el máximo.
3. **Interruptor HIGH/LOW** (para seleccionar velocidad de rango alto o velocidad de rango bajo)

	HI301N	HI311N
Capacidad máxima de agitado	2.5 Litros	5 Litros
Rango Velocidad Min. Max.	100 a 500 rpm 100 a 800/1000 rpm	
Velocidad Automática	no aplicable	standard
Alimentación HI301N/U HI301N/D HI311N/U HI311N/D	110/115V, 50/60 Hz 220/240V, 50/60 Hz 110/115V, 50/60 Hz 220/240V, 50/60 Hz	
Categoría Instalación	II	
Material recubrimiento	Acero Inoxidable AISI 316	
Entorno	0 a 50°C 95% RH max.	
Dimensiones	180 x 180 x 70 mm	
Peso	1.6 Kg	

HI302N & HI312N
AGITADORES CON INVERSION DE
MARCHA AUTOMATICA

HI302N agitador normal y **HI312N** agitador velocidad automática permiten agitar el fluido en ambas direcciones y son ideales para el mezclado de polvo, para asegurar un producto final homogéneo y una completa disolución de tipos de polvo difíciles de humedecer. Puede ajustar el tiempo de mezclado inverso de 30 seg. a 3 min. Si se fija en 1 minuto, el fluido girará en una dirección durante 1 min. y después invertirá su giro durante otro min. a la velocidad deseada en un ciclo repetido hasta que se desconecte el agitador.

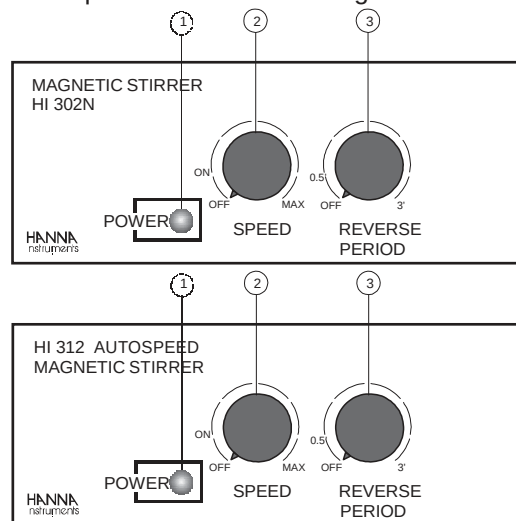



1. **Indicación de Alimentación** (Al conectarlo se ilumina el indicador LED)
2. **Botón SPEED** (para ajuste de rpm con ON/OFF) variable continuamente hasta el máximo.
3. **Botón REVERSE PERIOD** con ON/OFF y selección variable continuamente del tiempo del ciclo de inversión en minutos, de 0.5 a 3 minutos.

	HI302N	HI312N
Capacidad máxima de agitado	2.5 Litros	5 Litros
Rango Velocidad Min. Max.	100 rpm 800 a 1000 rpm	
Intervalo Inversión	de 30 segundos a 3 minutos	
Velocidad Automática	no aplicable	standard
Alimentación HI302N/U HI302N/D HI312N/U HI312N/D	110/115V, 50/60 Hz 220/240V, 50/60 Hz 110/115V, 50/60 Hz 220/240V, 50/60 Hz	
Categoría Instalación	II	
Material recubrimiento	Acero Inoxidable AISI 316	
Entorno	0 a 50°C 95% RH max.	
Dimensiones	180 x 180 x 70 mm	
Peso	1.6 Kg	

HI303N & HI313N
AGITADORES DOS VELOCIDADES CON
TACOMETRO

HI303N agitador normal y **HI313N** agitador velocidad automática incorporan un tacómetro de VCL.

Permiten la repetibilidad de agitado con precisión usando dos rangos separados. En cada rango, se puede ajustar perfectamente la velocidad para conseguir total precisión.

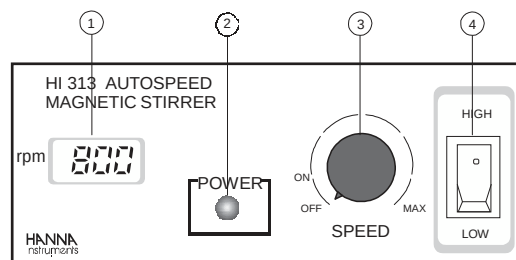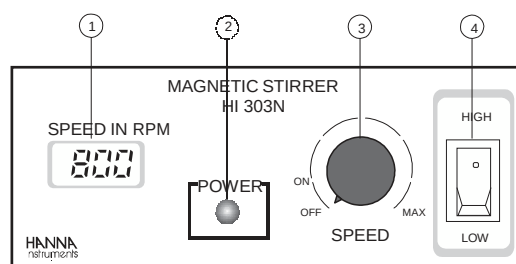


1. **La pantalla rpm** muestra velocidad rpm.
2. **Indicación alimentación** (indicador DEL se ilumina al conectarlo)
3. **Botón SPEED** (para ajustar rpm con ON/OFF) variable continuamente hasta el máximo.
4. **Interruptor HIGH/LOW** (para selec. rango velocidad baja o rango velocidad alta).

	HI303N	HI313N
Capacidad máxima de agitado	2.5 Litros	5 Litros
Rango Velocidad Min. Max.	100 a 500 rpm 100 a 800/1000 rpm	
Tacómetro	VCL de 4 dígitos	
Velocidad Automática	no aplicable	standard
Alimentación HI303N/U HI303N/D HI313N/U HI313N/D	110/115V, 50/60 Hz 220/240V, 50/60 Hz 110/115V, 50/60 Hz 220/240V, 50/60 Hz	
Categoría Instalación	II	
Material recubrimiento	Acero Inoxidable AISI 316	
Entorno	0 a 50°C 95% RH max.	
Dimensiones	180 x 180 x 70 mm	
Peso	1.6 Kg	

HI304N & HI314N AGITADORES DE INVERSION AUTOMATICA CON TACOMETRO

HI 304N normal y HI 314N velocidad automática son agitadores para trabajos pesados con tacómetro incorporado. Un circuito avanzado permite invertir la dirección de mezclado a un intervalo que puede ser fijado desde 30 seg. hasta 3 minutos.

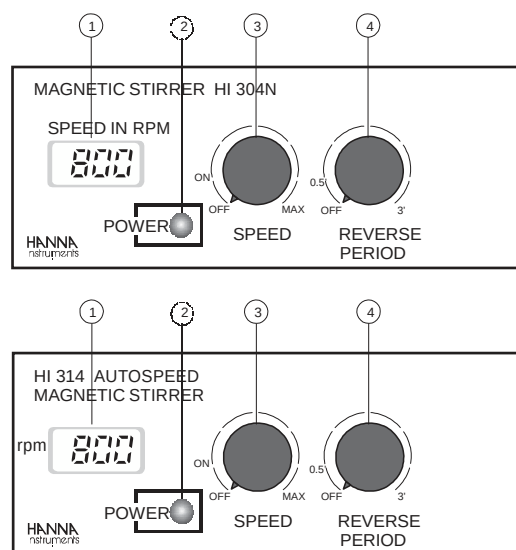

1. **La pantalla rpm** muestra velocidad rpm.
2. **Indicación alimentación** (indicador DEL se ilumina al conectarlo)
3. **Botón SPEED** (para ajustar rpm con ON/OFF) variable continuamente hasta el máximo.
4. **Botón REVERSE PERIOD** con ON/OFF y selección variable continuamente del tiempo de ciclo de inversión en minutos, de 0.5 a 3 minutos.


	HI304N	HI314N
Capacidad máxima de agitado	2.5 Litros	5 Litros
Rango Velocidad Min. Max.	100 rpm 800 a 1000 rpm	
Tacómetro	VCL de 4 dígitos	
Velocidad Automática	no aplicable	standard
Alimentación HI304N/U HI304N/D HI314N/U HI314N/D	110/115V, 50/60 Hz 220/240V, 50/60 Hz 110/115V, 50/60 Hz 220/240V, 50/60 Hz	
Categoría Instalación	II	
Material recubrimiento	Acero Inoxidable AISI 316	
Entorno	0 a 50°C 95% RH max.	
Dimensiones	180 x 180 x 70 mm	
Peso	1.6 Kg	

HI322N & HI324N AGITADORES CON TEMPORIZADOR CONTROL

HI322N y HI324N son agitadores de velocidad autom. equipados con temporizador de control para arrancar y parar el proceso de mezclado tras un tiempo que puede prefijarse de 5 min. a 2 horas. Ideales para aplicaciones rutinarias de mezclado en las que se sabe el tiempo de agitado requerido.

Liberan al operario de tener que controlar el proceso de mezclado constantemente.

Son ideales para flúidos no-Newtonianos con viscosidad cambiante durante el mezclado, o flúidos Newtonianos con capacidad 5 litros.

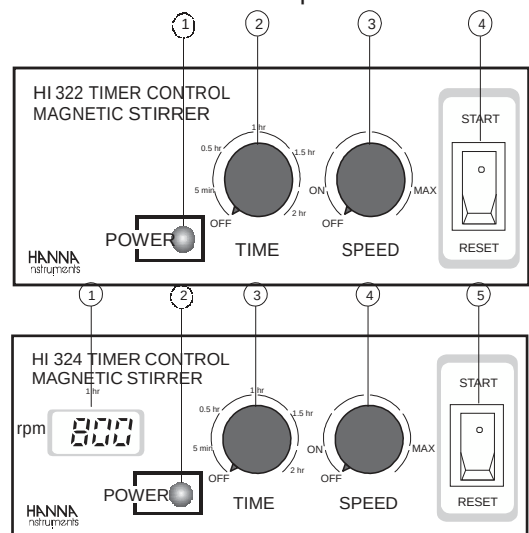


1. **La pantalla rpm** muestra velocidad rpm.
2. **Indicación alimentación** (indicador DEL se ilumina al conectarlo)
3. **Botón TIME** para fijar tiempo de mezclado de 5 min. a 2 horas
3. **Botón SPEED** (para ajustar rpm con ON/OFF) variable cont. hasta el máx.
5. **Interruptor START/RESET** para arrancar y poner a 0 el control de tiempo


	HI322N	HI324N
Capacidad máxima de agitado	5 Litros	5 Litros
Rango Velocidad Min. Max.	100 rpm 800 a 1000 rpm	
Rango Temporizador	Seleccionable por el usuario de 5 minutos a 2 horas	
Tacómetro	no aplicable	VCL 4 dígitos
Velocidad Automática	Standard	Standard
Alimentación HI322N/U HI322N/D HI324N/U HI324N/D	110/115V, 50/60 Hz 220/240V, 50/60 Hz 110/115V, 50/60 Hz 220/240V, 50/60 Hz	
Categoría Instalación	II	
Material recubrimiento	Acero Inoxidable AISI 316	
Entorno	0 a 50°C 95% RH max.	
Dimensiones	180 x180 x 70 mm	
Peso	1,5 Kg.	

GUIA DE FUNCIONAMIENTO PARA HI190M, HI200M, HI300N, HI310N


Asegúrese de que el **Botón SPEED** (en el panel frontal) y el interruptor ON/OFF (en la parte posterior, para **HI300N** y **HI310N** solo) están en la posición OFF.

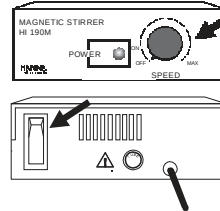


Coloque un vaso o contenedor de cristal en el centro de la parte superior del agitador y coloque la barilla agitadora en el vaso.

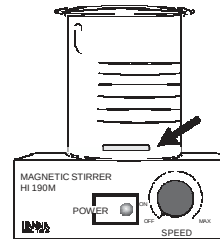


- Vierta el líquido que se ha de mezclar en el vaso. No lo llene hasta el borde y deje suficiente espacio para evitar que se derrame al mezclarlo.

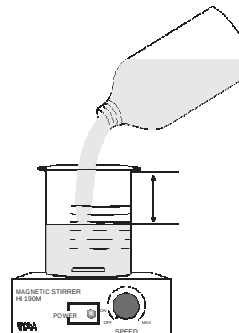


- Conecte el cordón de alimentación a la red y encienda el agitador (para **HI300N** y **HI310N** solo).

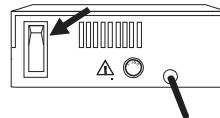


- Ajuste el **Botón SPEED** de forma lenta hasta lograr la velocidad de agitado requerida.

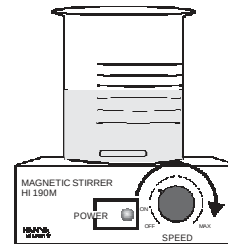

- Deje el tiempo suficiente para que la operación de mezclado alcance un flujo de rotación uniforme.

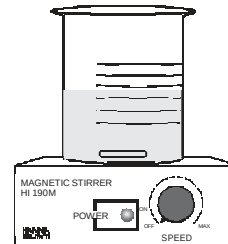



- Cuando la operación de mezclado haya sido completada, gire el **Botón SPEED** a la posición OFF.

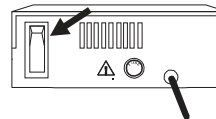


- Si no se precisa efectuar más operaciones de agitado, apague el agitador (para **HI 300N** y **HI 310N** solo) o desconecte el suministro de corriente (**HI 190M** y **HI 200M**).

GUIA DE FUNCIONAMIENTO PARA HI 301N, HI 303N, HI 311N, HI 313N


- Asegúrese de que el **Botón SPEED** y el interruptor ON/OFF están en la posición OFF.

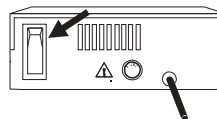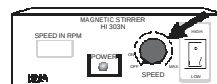


- Coloque un vaso o contenedor de cristal en el centro de la parte superior del agitador y coloque el imán en el vaso.

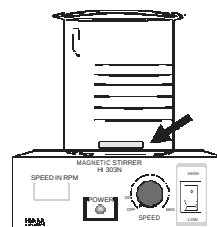


- Vierta el líquido que se ha de mezclar en el vaso. No lo llene hasta el borde y deje suficiente espacio para evitar que se derrame al mezclarlo.

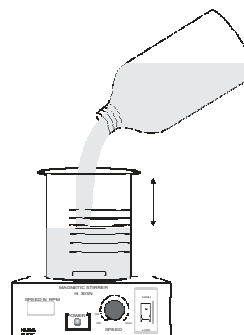

- Conecte el cordón de alimentación a la red y encienda el agitador con el interruptor ON/OFF.

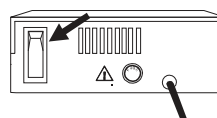

- Seleccione el rango alto o bajo con el interruptor HIGH/LOW según precise.



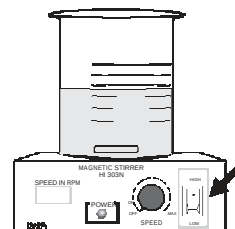


- Ajuste el **Botón SPEED** lentamente hasta alcanzar la velocidad de mezclado requerida.

- Deje suficiente tiempo para que la operación de mezclado alcance un flujo de rotación uniforme.

La velocidad de mezclado se indica en la VCL de rpm (**HI 303N** y **HI 313N** solo).



- Cuando haya completado la operación de mezclado, gire el **Botón SPEED** a la posición OFF.

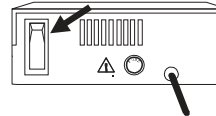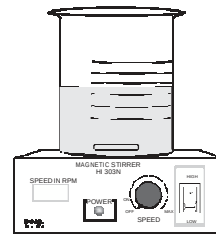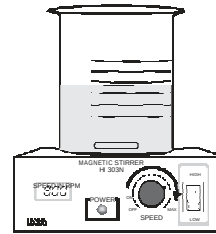


- Si no necesita utilizar más el mezclador, apáguelo.

GUIA DE FUNCIONAMIENTO PARA HI302N, HI304N, HI312N, HI314N


- Asegúrese de que el **Botón SPEED** y el interruptor ON/OFF están en la posición OFF.

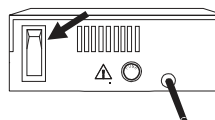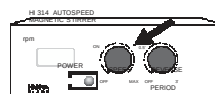


- Coloque un vaso o contenedor de cristal en el centro de la parte superior del agitador y coloque la imán en el vaso.

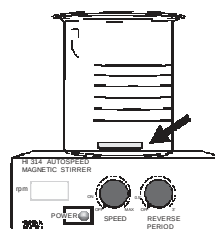


- Vierta el líquido que se ha de mezclar en el vaso. No lo llene hasta el borde y deje suficiente espacio para evitar que se derrame al mezclarlo.

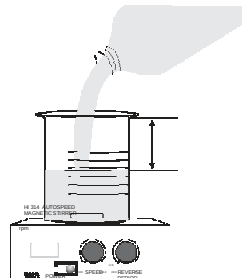

- Conecte el cordón de corriente a la red y encienda el mezclador con el interruptor ON/OFF.

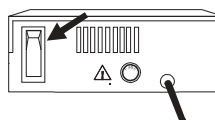


- Fije mediante el botón **REVERSE PERIOD** el tiempo de inversión deseado desde 30 segundos a 3 minutos

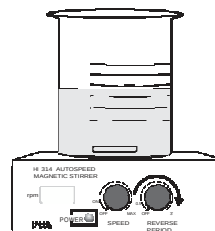


E.g. si lo fija en un minuto, el fluído girará en una dirección durante un minuto y después invertirá su rotación durante otro minuto en un ciclo repetido hasta que apague el mezclador.

- Ajuste el botón SPEED hasta que se logre la velocidad de mezclado requerida.

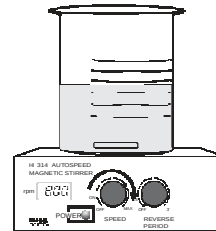


- Deje suficiente tiempo para que la operación de mezclado alcance un flujo de rotación uniforme. La velocidad de mezclado se indica en la pantalla rpm para HI 304N y HI314N.

- Cuando se haya completado la operación de agitado, gire el botón SPEED a la posición OFF.


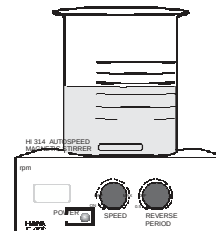


- Si no precisa hacer más operaciones de agitado, apague el agitador.

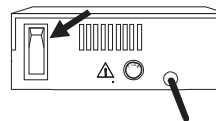


GUIA DE FUNCIONAMIENTO PARA HI 322N AND HI 324N


- Asegúrese de que el botón SPEED y el interruptor ON/OFF están en la posición OFF y el interruptor START/RESET en la posición RESET.

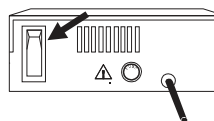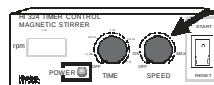



- Coloque el vaso o contenedor de cristal en el centro de la parte superior del medidor y coloque el imán en el vaso.

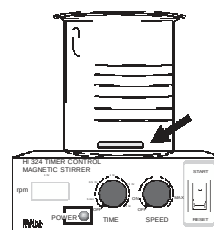


- Vierta los líquidos a mezclar en el vaso. No lo llene hasta el borde. Deje suficiente espacio para evitar derrames durante la operación de agitado.

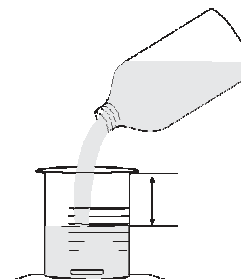

- Conecte el cordón de alimentación a la red y encienda el agitador con el interruptor ON/OFF.

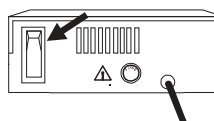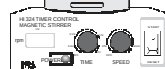


- Fije con el botón TIME el tiempo de agitado deseado de 5 min. a 2 horas. Luego fije el interruptor START/RESET en START.

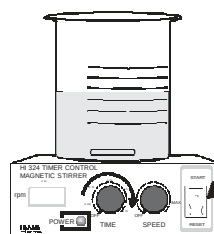


El mezclador solo empezará a mezclar cuando el interruptor START esté en la posición START y terminará cuando haya pasado el tiempo de mezclado seleccionado.

- Ajuste el botón SPEED lentamente hasta lograr la velocidad de agitado requerida.

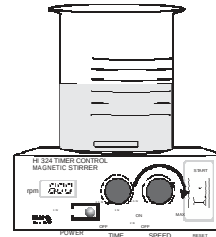


- Deje suficiente tiempo para que la operación de mezclado alcance un flujo de rotación uniforme. La velocidad de agitado se indica en la pantalla rpm para **HI 324N**.

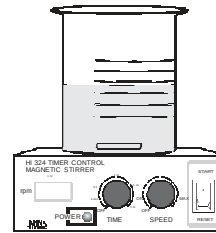

- Cuando la operación de agitado haya terminado, gire el botón SPEED a la posición OFF.

- Si no precisa efectuar más operaciones de mezclado, apague el agitador.

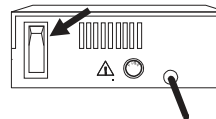

ACCESORIOS

HI76502/P Micro-imán agitador (10 u.) para HI190M y HI200M

HI76503/P Imán agitador (10 u.) para todos los demás modelos

GARANTIA

Todos **los medidores** de Hanna Instruments **están garantizados durante dos años** contra todo defecto de fabricación y materiales, siempre que sean usados para el fin previsto y se proceda a su conservación siguiendo las instrucciones.

Esta garantía está limitada a la reparación o cambio sin cargo.

La garantía no cubre los daños debidos a accidente, mal uso, manipulación indebida o incumplimiento del mantenimiento preciso.


Si precisa de asistencia técnica, contacte con el distribuidor al que adquirió el instrumento. Si éste está en garantía indíquenos el número de modelo, la fecha de la compra, número de serie y tipo de fallo. Si la reparación no está cubierta por la garantía se le comunicará el importe de los gastos correspondientes. Si el instrumento ha de ser devuelto a Hanna Instruments, primero se ha de obtener el Número de Autorización de Mercancías Devueltas de nuestro Departamento de Servicio al Cliente y después enviarlo a portes pagados. Al enviar el instrumento cerciórese de que está correctamente embalado, para asegurar una protección completa.

Para validar la garantía, rellene y devuélvanos la tarjeta de garantía adjunta dentro de los 14 días posteriores a la fecha de la compra.

Todos los derechos están reservados. El contenido de este manual no podrá ser reproducido, ni total ni parcialmente, sin el previo permiso escrito del titular del copyright, Hanna Instruments Inc., Woonsocket, Rhode Island, 02895, USA.

Hanna Instruments se reserva el derecho de modificar el diseño, construcción y apariencia de sus productos sin previo aviso.

DECLARACION DE CONFORMIDAD CE

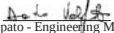	
DECLARATION OF CONFORMITY	
We	
Hanna Instruments Srl V.le delle industrie 12 35010 Ronchi di Villafranca (PD) ITALY	
herewith certify that the magnetic stirrers	
HI190M HI200M HI300N HI301N HI302N HI303N HI304N HI310N HI311N HI312N HI313N HI314N HI322N HI324N	
have been tested and found to be in compliance with the following regulations:	
IEC 801-2	Electrostatic Discharge
IEC 801-3	RF Radiated
IEC 801-4	Fast Transient
EN 55022	Radiated, Class B
Date of Issue: 03-01-1996	 D. Volpato - Engineering Manager On behalf of Hanna Instruments S.r.l.

Recomendaciones a los Usuarios

Antes de utilizar estos productos, cerciórese de que son totalmente apropiados para el entorno en el que van a ser utilizados.

El funcionamiento de estos instrumentos en zonas residenciales podría causar interferencias inaceptables a equipos de radio y TV, por lo que el operario tendrá que tomar todas las medidas necesarias para corregir estas interferencias.

Toda modificación realizada en el equipo por el usuario puede degradar las características de EMC del mismo.

Desconecte el mezclador de la toma de alimentación antes de sustituir el fusible.

Para evitar daños o quemaduras, no coloque estos mezcladores en hornos micro-ondas.



www.hannachile.com

Lo Echevers 311, Quilicura, Santiago

Teléfono: (2) 2862 5700