




Soluciones de Calibración Técnica de pH 4.01, 7.01 y 10.01 con Solución de Almacenamiento de Electrodo (4 x 500 mL) – HI54710-10

Description

El HI54710-10 es un conjunto de estándares de calibración técnica de calidad superior de pH 4.01, 7.01 y 10.01 producidos de acuerdo con la norma ISO 3696 / BS3978 utilizando sales de alta pureza, agua desionizada, balanzas certificadas con control de peso y cristalería de clase A en un entorno con temperatura controlada monitoreado con termómetros certificados. Los valores informados son precisos a +/- 0.01 pH a 25°C y son trazables con Materiales de Referencia Estándar (SRMs) del NIST.

La HI70300L es una solución que puede ser utilizada para almacenar su electrodo de pH *. Para garantizar un tiempo de respuesta óptimo, la punta del sensor de vidrio y la unión de referencia del electrodo de pH se deben mantener húmedas y no se deben secar cuando no se usen. Colocar el electrodo en un pequeño vaso lleno de solución de almacenamiento o reemplazar la solución en la tapa protectora es una forma adecuada de almacenar el electrodo. La HI70300L también se debe usar para rehidratar el electrodo después de un procedimiento de limpieza sumergiéndolo durante al menos una hora antes de tomar medidas.


Image not found or type unknown

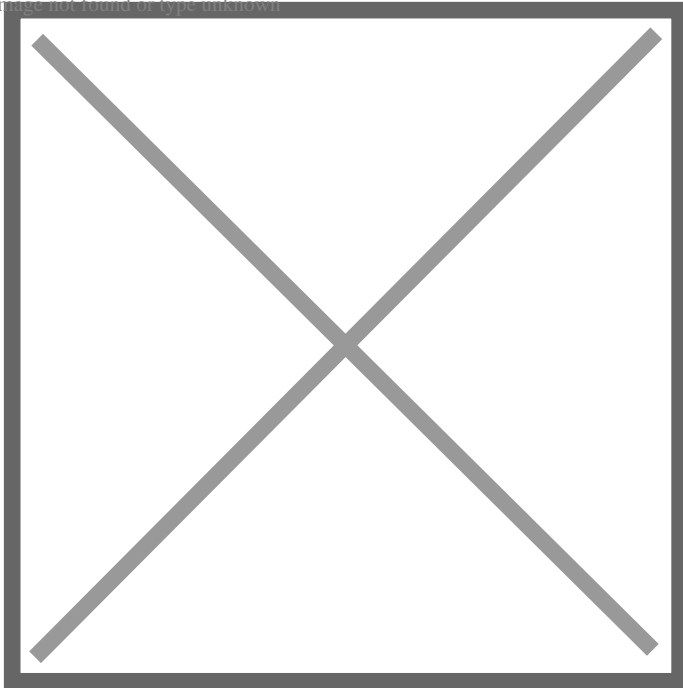

* Nunca almacene electrodos de pH u ORP en agua destilada o desionizada. Hacerlo acortará la vida útil del sensor

El HI54710-10 se suministra con Certificado de Análisis

Image not found or type unknown

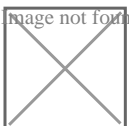

- Código de productoe
- Numero de lote
-

Valor promedio del lote

- SRMs que se usaron
- Fecha de fabricación
- Fecha de caducidad

Botellas herméticas con sellos a prueba de manipulaciones

- La botella está sellada herméticamente para evitar la entrada de airer (CO₂) y causar un cambio en el valor del estándar de pH. Cuando se abre la botella por primera vez, es tan fresca como el día en que se produjo en nuestra fábrica

Cada botella marcada con el número de lote y fecha de vencimiento

- Los estándares de Hanna están especialmente formulados para mantener su valor de pH para una botella sin abrir

Etiqueta codificada por colores para una fácil identificación del valor del estándar de pH

- Fácil de identificar diferentes valores de estándar
- La solución no contiene colorantes que puedan manchar la celda de referencia de un electrodo de pH