

HI83314-11 Kit de Cubeta CAL Check para Fotómetro de Aguas Residuales HI83314

SKU: HI 83314-11

RESUMEN

Los estándares CAL Check[™] HI83314-11 proporcionan un método simple para calibrar y validar el Fotómetro de Aguas Residuales HI83314. Este conjunto de estándares de alta calidad se suministra con un Certificado de Análisis que proporciona el número de lote, los valores de referencia y la fecha de vencimiento para la trazabilidad.

- Valores de absorbancia a 420 nm, 466 nm, 525 nm, 610 nm y 0 nm
- Suministrado con Certificado de Análisis
- Reutilizable con una larga vida útil

DESCRIPCIÓN

Descripción

El fotómetro multiparámetro compacto HI83314, se utiliza para medir parámetros fundamentales sobre la calidad del agua y aguas residuales. El medidor es uno de los fotómetros más avanzados que se encuentran disponibles en el mercado. Posee un diseño óptico innovador que utiliza un detector referencial y un lente de enfoque, que elimina los errores que ocurren debido a los cambios en la fuente lumínica y por los defectos en la cubeta de vidrio. En este medidor se pueden programar 10 parámetros fundamentales que miden la calidad del agua y aguas residuales por medio de 20 métodos diferentes, los cuales cubren una amplia variedad de rangos. Los parámetros que requieren digestión para el tratamiento de aguas residuales incluyen DQO, nitrógeno total y fósforo total, los cuales son importantes para supervisar la eliminación de nutrientes. El HI83314 también ofrece un modo de medición de la absorbancia para verificar el desempeño de la lectura, y una opción para los usuarios que desarrollen una concentración personalizada, la comparen con las curvas de absorbancia.

Para ayudarle a ahorrar espacio valioso en el laboratorio, el HI83314 funciona como un medidor de pH profesional y cuenta con una entrada de electrodo de pH/temperatura digital. Ahora se puede usar un solo medidor tanto para las mediciones fotométricas, como para el pH.

Sistema óptico innovador

Ofrece un rendimiento incomparable para un fotómetro de sobremesa

Entrada de electrodo de pH digital

Ahorre espacio valioso con un equipo que funciona como fotómetro y medidor de pH de laboratorio

Modo de medición de la absorbancia

Permite verificar el rendimiento mediante los estándares CAL Check

Detalles

El fotómetro HI83314 de sobremesa calcula 10 parámetros fundamentales sobre la calidad del agua y aguas residuales utilizando 20 métodos diferentes, permitidos por los múltiples rangos y variaciones químicas para su aplicación específica. Se incluye el parámetro de demanda química de oxígeno (DQO) para el tratamiento de aguas residuales industriales y municipales. Los parámetros de fósforo y nitrógeno incluidos son de gran beneficio para los clientes que tratan aguas residuales municipales y que necesiten monitorizar los procesos de eliminación de nutrientes biológicos y químicos. Este fotómetro cuenta con un sistema óptico innovador que utiliza LED, filtros de interferencia de banda estrecha, lentes de enfoque, un fotodetector de silicio para medir la absorbancia y un detector referencial que mantiene una fuente lumínica constante, lo que garantiza que, en cada ocasión, se realicen lecturas fotométricas precisas y repetibles.

El equipo posee una entrada para un electrodo de pH digital, que permite al usuario medir el pH mediante un electrodo de vidrio convencional. El electrodo de pH digital incorpora un microchip dentro de la sonda, en el cual se guarda toda la información de calibración. Mantener almacenada esta información, permite la sustitución en caliente de los electrodos de pH sin necesidad de recalibrar. Todas las mediciones de pH con variaciones de temperatura, se estabilizan de forma automática gracias a un termistor que se ubica en la punta de un bulbo sensor, el cual ayuda a que la medición de temperatura sea rápida y precisa.

En el equipo se proporcionan 2 puertos USB que se utilizan para transferir datos a una unidad USB o a un computador, y también se usan como entrada de una fuente de energía para el medidor. Asimismo, para una mayor comodidad y portabilidad, el medidor funciona con una batería interna de polímero de litio de 3.7 VDC recargable.

El HI83314 ofrece un modo de medición de la absorbancia que permite utilizar los criterios CAL Check para validar el rendimiento del sistema. En este modo, el usuario puede seleccionar 1 de las 4 longitudes de onda lumínicas (420 nm, 466 nm, 525 nm y 610 nm), medirla, marcar una concentración personalizada y compararla con el modo de absorbancia. Esto es de utilidad para aquellos usuarios que tienen su propio método químico y para que los educadores enseñen el concepto de absorbancia usando la ley de Beer-Lambert.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- *Pantalla LCD gráfica de 128 x 64 píxeles con retroiluminación*
 - La pantalla gráfica con retroiluminación permite una fácil visualización en condiciones de poca luz
 - La pantalla LCD de 128 x 64 píxeles, presenta una interfaz de usuario sencilla con teclado virtual y ayuda en pantalla, para brindar una guía al usuario sobre el uso del medidor
- *Temporizador de reacción incorporado para realizar mediciones fotométricas*
 - La medición se lleva a cabo una vez finaliza el temporizador
 - Para una mayor continuidad en las mediciones, se garantiza que, gracias al temporizador, todas las lecturas se realicen en los intervalos de reacción apropiados, independientemente del usuario
- *Modo de la absorbancia*
 - Este equipo cuenta con las cubetas CAL Check exclusivas de Hanna que validan la fuente lumínica y el detector
 - Estas cubetas permiten que el usuario marque la concentración o la absorbancia en una longitud de onda específica para usarse con los datos químicos proporcionados por el usuario o para el aprendizaje de los principios de la fotometría
- *Unidades de medida*
 - En la lectura se muestra la unidad apropiada de medida, junto con la forma química
- *Conversión de resultados*
 - Con solo presionar un botón, y de manera automática, el equipo adapta las lecturas a otras formas químicas
- *Cubierta de la cubeta*
 - Ayuda a evitar que la luz parásita afecte las mediciones
- *Entrada del electrodo de pH digital*
 - Mide el pH y la temperatura con solo una sonda
 - Utiliza los criterios de las buenas prácticas de laboratorio (GLP) que rastrea la información de calibración, inclusive la fecha, tiempo, búferes utilizados, offset y pendiente para determinar la trazabilidad
 - El sistema CAL Check de pH alerta al usuario sobre posibles problemas durante el proceso de calibración
 - Ahorro de espacio gracias a un medidor de pH y fotómetro en un solo equipo
- *Registro de datos*
 - Puede guardar hasta 1000 lecturas fotométricas y de pH, solo con presionar la tecla LOG. Las lecturas registradas se recuperan fácilmente al pulsar el botón RCL
 - Se puede utilizar un teclado alfanumérico para introducir la identificación de la muestra y del usuario
- *Conectividad*
 - Las lecturas registradas se pueden transferir de forma rápida y sencilla a una unidad USB utilizando el puerto USB-A, o trasladarlas a un computador usando el puerto microUSB-B
 - Todos los datos se exportan como un archivo .csv, el cual se puede utilizar con muchos programas de hoja de cálculo
- *Indicador del estado de la batería*
 - Indica la duración de batería restante

- *Mensajes de error*

- Los mensajes de error del fotómetro incluyen: no hay tapa, cero alto y estándar demasiado bajo
- Los mensajes para calibrar el pH incluyen: limpiar el electrodo, comprobar el búfer y verificar la sonda
-

FUNCIONES EN PANTALLA




Selección del método

De forma sencilla, los usuarios pueden seleccionar cualquiera de los 60 métodos de medición solo presionando el botón METHOD.



Registro de datos

Se pueden registrar hasta 1000 lecturas de medición con el usuario y la identificación de la muestra, los cuales se puede recuperar para utilizarlos en el futuro.

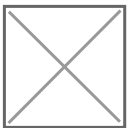

Modo de medición del pH

Seleccionar el modo de medición del pH permite utilizar el fotómetro como un medidor de pH profesional que incluye muchas características como mediciones con compensación de temperatura, calibración automática en dos puntos y GLP.

Sistema óptico innovador

El equipo HI83300 se diseñó con un sistema óptico innovador que incorpora un divisor de haz, cuya luz se puede utilizar en lecturas de absorbancia y como detector referencial; este último, supervisa la intensidad de la luz y la ajusta cuando ocurren desviaciones debido a la fluctuación de la energía o al calentamiento de los componentes ópticos. Cada pieza desempeña un papel importante al proporcionar un rendimiento sin precedentes para un fotómetro.



Fuente LED de alta eficiencia

Una fuente LED ofrece un rendimiento superior cuando se compara con una lámpara halógena. La LED tiene una eficiencia de iluminación mayor, la cual proporciona una luminosidad superior mientras utiliza menos energía. También produce poco calor, lo que evita que los componentes ópticos y la estabilidad electrónica se vean afectados. La LED se encuentra disponible en una amplia gama de longitudes de onda, ya que, aunque se supone que las lámparas halógenas son de luz blanca (todas las longitudes de onda de la luz visible), en realidad tienen una salida pobre de luz azul/violeta.

Filtros de interferencia de banda estrecha para asegurar la calidad

El filtro de interferencia de banda estrecha no solo garantiza una mayor precisión de la longitud de onda (± 1 nm), sino que también es extremadamente eficiente. Los filtros que se utilizan en el equipo permiten que se transmita hasta 95% de LED en comparación con otros filtros que solo son eficientes en un 75%. Esta alta eficiencia garantiza una fuente lumínica más fuerte y brillante. El resultado final es una mayor estabilidad de medición y menor error en la longitud de onda.

Detector referencial para una fuente de iluminación estable

Se utiliza un divisor de haz que forma parte del sistema interno referencial del fotómetro HI83300. El detector referencial equilibra cualquier desviación que pueda ocurrir debido a fluctuaciones de energía o cambios en la temperatura ambiental. Ahora puede confiar en una fuente de iluminación estable entre su medición en blanco (cero) y la medición de las muestras.

Mayor tamaño de la cubeta

La celda de muestreo del HI83314 se ajusta a una cubeta de vidrio redonda con una longitud de trayectoria de 25 mm. Junto con los componentes ópticos avanzados, el tamaño más grande de la cubeta reduce de forma considerable, los errores de rotación que ocurren debido a la marca de referencia de las cubetas. La longitud de trayectoria relativamente larga de la cubeta de muestreo, permite que la luz pase por una mayor parte de la solución de muestra, lo que garantiza mediciones precisas, incluso en muestras de baja absorbancia.

Lente de enfoque para un mayor rendimiento lumínico

La adición de un lente de enfoque al recorrido óptico, permite recolectar toda la luz que sale de la cubeta, y la concentra en el fotodetector de silicio. Este enfoque innovador sobre las mediciones fotométricas, elimina los errores que ocurren por los defectos y rayones que se encuentran en la cubeta de vidrio, lo que suprime la necesidad de indizar la cubeta.

Especificaciones

Parámetro	Rango	Resolución	Precisión (a 25°C)	Método	Longitud de Onda	Código del Reactivo
Absorbancia	0.000 a 4.000 Abs	0.001 Abs	+/- 0.003Abs @ 1.000 Abs			
Amonio, Rango Bajo	0.00 a 3.00 mg/L (como NH3 -N)	0.01 mg/L	±0.04 mg/L ±4% de lectura	Adaptado de ASTM Manual of Water and Environmen tal Technology, D1426 Método Nessler.	420 nm	HI93700-01
Amonio, Rango Medio	0.00 a 10.00 mg/L (as NH3 -N)	0.01 mg/L	±0.05 mg/L ±5% de lectura	Adaptado de ASTM Manual of Water and Environmen tal Technology, D1426 Método Nessler.	420 nm	HI93715-01

Parámetro	Rango	Resolución	Precisión (a 25°C)	Método	Longitud de Onda	Código del Reactivo
Amonio, Rango Alto	0.0 a 100.0 mg/L (como NH3 -N)	0.1 mg/L	±0.5 mg/L ±5% de lectura	Adaptado de ASTM Manual of Water and Environmen tal Technology, D1426 Método Nessler.	420 nm	HI93733-01
Demanda Química de Oxígeno, Rango Bajo	0 a 150 mg/L (como O2)	1 mg/L	±5 mg/L o ±4% de lectura	Adaptado de USEPA 410.4	420 nm	HI93754A- 25
Demanda Química de Oxígeno, Rango Medio	0 a 1500 mg/L (como O2)	1 mg/L	±15 mg/L o ±4% de lectura	Adaptado de USEPA 410.4	610 nm	HI93754B- 25
Demanda Química de Oxígeno, Rango Alto	0 a 15000 mg/L (como O2)	1 mg/L	±150 mg/L o ±2% de lectura	Adaptado de USEPA 410.4	610 nm	HI93754C- 25
Cloro Libre	0.00 a 5.00 mg/L (como Cl2)	0.01 mg/L	±0.03 mg/L ±3% de lectura	Adaptado de EPA Método recomenda do DPD 330.5	525 nm	HI93701-01
Cloro Total	0.00 a 5.00 mg/L (como Cl2)	0.01 mg/L	±0.03 mg/L ±3% de lectura	Adaptado de EPA Método recomenda do DPD 330.5	525 nm	HI93711-01

Parámetro	Rango	Resolución	Precisión (a 25°C)	Método	Longitud de Onda	Código del Reactivo
Nitrato	0.0 a 30.0 mg/L (como NO3 - N)	0.1 mg/L	±0.5 mg/L ±10% de lectura	Adaptado del Método de Reducción de Cadmio	525 nm	HI93728-01
Nitrito, Rango Bajo	0 a 600 µg/L (como NO2 -N)	1 µg/L	±20 µg/L ±4% de lectura	Adaptado de EPA Método Diazotizació n 354.1	466 nm	HI93707-01
Nitrito, Rango Alto	0 a 150 mg/L (como NO2-)	1 mg/L	±4 mg/L ±4% de lectura	Adaptado del Método Sulfato Ferroso	575 nm	HI93708-01
Nitrógeno Total, Rango Bajo	0.0 a 25.0 mg/L (como N)	0.1 mg/L	±1.0 mg/L o ±5% de lectura	Método Ácido Cromotrópi co	420 nm	HI93767A- 50
Nitrógeno Total, Rango Alto	0 a 150 mg/L (como N)	1 mg/L	±3 mg/L o ±4% de lectura	Método Ácido Cromotrópi co	420 nm	HI93767B- 50

Parámetro	Rango	Resolución	Precisión (a 25°C)	Método	Longitud de Onda	Código del Reactivo
Fósforo Reactivo, Rango Bajo	0.00 a 1.60 mg/L (como P)	0.01 mg/L	±0.05 mg/L o ±4% de lectura	Adaptado de EPA Método 365.2 and Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 20th edition, 4500-P E, Método Ácido Ascorbico	610 nm	HI93758A- 50
Fósforo Reactivo, Rango Alto	0.0 a 32.6 mg/L (como P)	0.1 mg/L	±0.5 mg/L o ±4% de lectura	Adaptado de Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 20th edition, 4500-P C, Método del Ácido Vanadomoli bdofosfóric o	420 nm	HI93763A- 50

Parámetro	Rango	Resolución	Precisión (a 25°C)	Método	Longitud de Onda	Código del Reactivo
Fósforo, Ácido Hidrolizable	0.00 a 1.60 mg/L (como P)	0.01 mg/L	±0.05 mg/L o ±5% de lectura	Adaptado de EPA Método 365.2 and Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 20th edition, 4500-P E, Método Ácido Ascorbico	610 nm	HI93758B- 50
Fósforo Total, Rango Bajo	0.00 a 1.15 mg/L (como P)	0.01 mg/L	±0.05 mg/L o ±6% de lectura	Adaptado de EPA Método 365.2 and Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 20th edition, 4500-P E, Método Ácido Ascorbico	610 nm	HI93758C- 50

Parámetro	Rango	Resolución	Precisión (a 25°C)	Método	Longitud de Onda	Código del Reactivo
Fósforo Total, Rango Alto	0.0 a 32.6 mg/L (como P)	0.1 mg/L	±0.5 mg/L o ±5% de lectura	Adaptado de Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 20th edition, 4500-P C, Método del Ácido Vanadomoli bdofosfóric o	420 nm	HI93763B- 50

Especificaciones Generales

Canales de entrada	1 entrada de electrodo de pH y 5 longitudes de onda del fotómetro
Electrodo de pH	Electrodo de pH digital (no incluido)
Tipo de registro	Entrada opcional de registro sobre demanda con nombre de usuario e identificación de muestra
Memoria de registro	1000 lecturas
Conectividad	Receptor de USB-A a unidad USB; microUSB-B para conectar la fuente de energía y el computador
GLP	Datos de calibración para el electrodo de pH conectado
Pantalla	LCD de 128 x 64 píxeles retroiluminado
Tipo/vida de la batería	Batería recargable de polímero de litio de 3.7 VDC/>500 mediciones fotométricas o 50 horas de medición de pH continua

Canales de entrada	1 entrada de electrodo de pH y 5 longitudes de onda del fotómetro
Fuente de alimentación	Adaptador de corriente 5 VDC USB 2.0 con USB-A a cable de microUSB-B (incluido)
Ambiente	0 a 50.0 °C (32 a 122.0 °F); 0 a 95% RH, sin condensación
Dimensiones	206 x 177 x 97 mm (8.1 x 7.0 x 3.8")
Peso	1.0 kg (2.2 libras)
Fuente lumínica del fotómetro/colorímetro	5 LED con filtros de interferencia de banda estrecha de 420 nm, 466 nm, 525 nm, 575 nm y 610 nm
Detector lumínico del fotómetro/colorímetro	Fotodetector de silicio
Filtro de paso de banda ancha	8 nm
Precisión del filtro de paso de banda ancha	±1 nm
Tipo de cubeta	24.6 mm, redonda
Número de métodos	128 máx.
Información sobre pedidos	El HI83314 se suministra con cubetas y tapas de muestreo (4 unidades), paño para limpiar las cubetas, conector de cable USB a microUSB, adaptador de corriente y manual de instrucciones.

ACCESORIOS

HI 83314 se suministra con cubetas y tapas de muestra (4 unidades), paño para limpiar cubetas, conector de cable USB a micro USB, adaptador de corriente y manual de instrucciones.

* Tenga en cuenta que los reactivos no están incluidos

CÓMO PEDIR

HI83314, fotómetro, Fotómetro de sobremesa, porcentaje de transmitancia, análisis fotométrico de la calidad del agua,dqo, Fotómetro Multiparámetro, Fotómetro Hanna

