

Solución de Almacenamiento de Electrodos (230 ml) – HI70300M

SKU: HI 70300M



RESUMEN


La HI70300M es una solución de almacenamiento preparada con químicos de grado reactivo utilizada para garantizar el rendimiento óptimo de electrodos de pH y ORP. Es necesario almacenar el electrodo de pH en una solución para mantener el bulbo de vidrio y la unión del electrodo húmedos. Idealmente, se debe usar una solución de almacenamiento, nunca almacene un electrodo en agua destilada o desionizada. La solución de almacenamiento de Hanna Instruments está específicamente formulada para minimizar el crecimiento microbiano y evitar cualquier efecto de difusión/osmosis entre la solución y el electrolito de referencia interno. El almacenamiento de los electrodos de pH y/o ORP en una solución de almacenamiento también mantendrá la unión limpia. Mantener el bulbo de vidrio y la unión húmedos ayudarán a garantizar una medición rápida y confiable. En el caso de limpiar el electrodo de pH en una de nuestras soluciones de limpieza, recomendamos remojar el electrodo en la solución de almacenamiento HI70300M durante al menos una hora antes de tomar mediciones.

- Formulación especial para minimizar el crecimiento microbiano y los efectos difusión/osmosis entre la solución y el electrolito de referencia interno
- Fabricada específicamente para electrodos de pH y ORP

- Fecha de vencimiento y número de lote claramente marcados

DESCRIPCIÓN

La HI70300M es una solución utilizada para almacenar el electrodo de pH *. Para garantizar un tiempo de respuesta óptimo, el bulbo de vidrio y la unión de referencia del electrodo de pH se deben mantener húmedos y no se deben secar cuando no se usen. Colocar el electrodo en un pequeño vaso lleno de solución de almacenamiento o reemplazar la solución de la tapa protectora es la forma adecuada de almacenar el electrodo. La HI70300M también debe ser utilizada para rehidratar el electrodo después de un procedimiento de limpieza, sumergiéndolo durante al menos una hora antes de tomar mediciones.

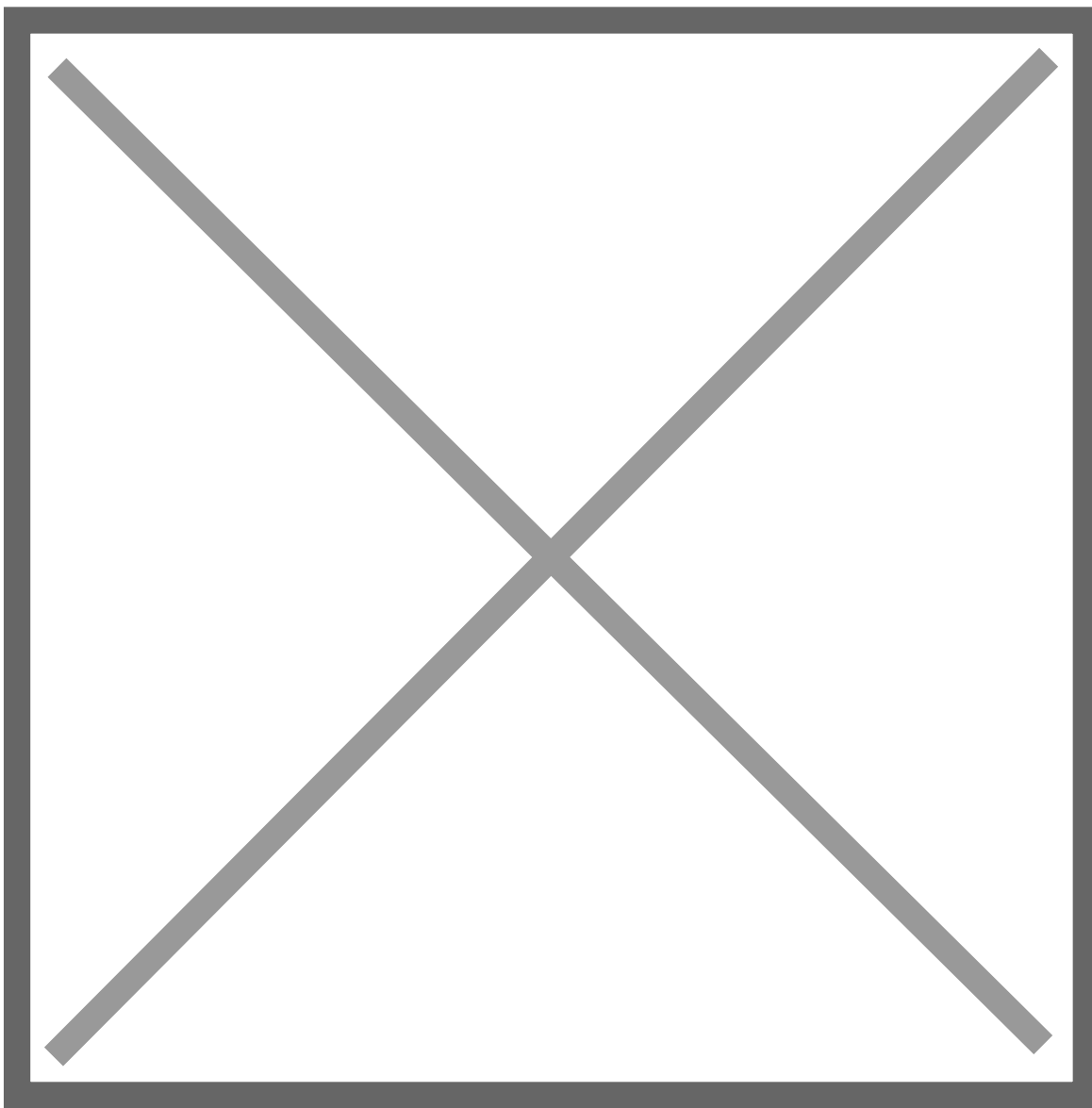

* Nunca almacene electrodos de pH y ORP en agua destilada o desionizada. Hacerlo acortará la vida útil del sensor.

Botella hermética con sello a prueba de manipulaciones

- Garantiza la calidad y la frescura de la solución

Cada botella marcada con el número de lote y fecha de vencimiento

- Las soluciones de almacenamiento de Hanna están especialmente formuladas para tener una caducidad de 5 años desde la fabricación para una botella sin abrir.

ESPECIFICACIONES

Peso	0,3 kg
Marca	BeerLine, WineLine, GroLine, MarineLine, Pool Line, Food Care
Brand	BeerLine, Food Care, GroLine, MarineLine, PoolLine, WineLine