


Viales de Reactivo de DQO Rango Bajo con Código de Barras, Método EPA (25 pruebas) – HI94754A-25

SKU: HI94754A-25



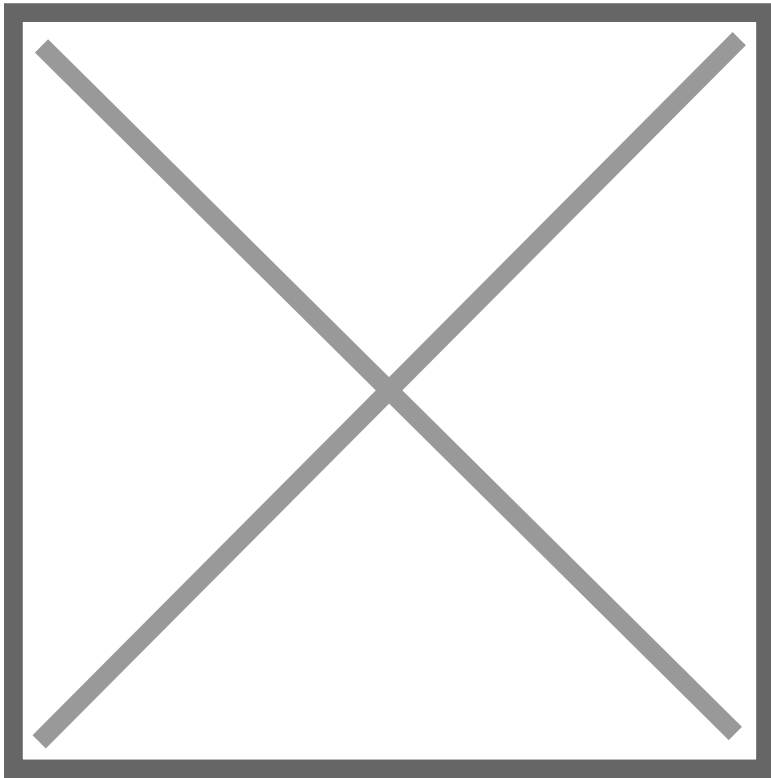

Los HI94754A-25 son viales de reactivo con código de barras que siguen el método aprobado por la EPA para la determinación de la demanda química de oxígeno (DQO) de rango bajo utilizando un fotómetro de mesa compatible. Estos reactivos de alta calidad se fabrican en nuestras instalaciones de última generación y están claramente marcados con el número de lote y la fecha de vencimiento en cada caja para su trazabilidad.

- Reactivos predosificados para facilitar su uso
- Viales con código de barras
- Marcado con fecha de vencimiento y número de lote para trazabilidad

DESCRIPCIÓN

El kit de DQO HI94754A-25 contiene 25 viales con códigos de barras listos para usar que contienen reactivos medidos previamente. Estos reactivos de alta calidad siguen el método 410.4 aprobado por la EPA. En este método, se requiere una digestión con calor en condiciones ácidas para permitir que los compuestos orgánicos oxidables presentes en la muestra reduzcan el cromo hexavalente a cromo trivalente, provocando un color naranja en la muestra. La intensidad del color se determina mediante un fotómetro compatible y la concentración de DQO se muestra en mg/L (ppm) de O₂. Estos reactivos están diseñados para usarse con muestras que tienen un rango esperado de 0 a 150 mg/L (ppm) O₂.

El reconocimiento automático de muestras con códigos de barras es una característica interesante cuando se utilizan los viales de reactivo HI94754A-25 con un fotómetro compatible con códigos de barras. Cuando se inserta en el soporte del vial del fotómetro, el método de muestra y el rango se identifican automáticamente a partir del código de barras. El código de barras tiene cuatro dígitos: Los dos primeros dígitos son para identificación de parámetros y los dos segundos dígitos son para identificación de lote de reactivo. Los viales para diferentes métodos de DQO se pueden distinguir por un código de barras impreso en el vial; los códigos de barras para los diferentes métodos se muestran en la siguiente tabla.

Comparación de Métodos

EPA : El método 410.4 aprobado por la EPA para la determinación de DQO requiere el uso de sulfato de mercurio (HgSO₄). El sulfato de mercurio está presente en los viales de reactivos de la EPA para mitigar la interferencia del cloruro en la muestra de medición. Este es un requisito común para las plantas de tratamiento de aguas residuales y las instalaciones de fabricación de alimentos que tienden a tener concentraciones más altas de cloruro presente en sus efluentes. Cuando se utilizan reactivos que siguen el método de la EPA, es importante tratar los viales usados como desechos peligrosos, ya que los desechos de mercurio deben reciclarse.

Dicromato : El método de dicromato está adaptado de los métodos estándar de la EPA e ISO para la determinación de DQO, que están aprobados para medir concentraciones de DQO de hasta 1500 mg/L de O₂. Para muestras con concentraciones esperadas en el rango alto de 0 a 15000 mg/L de O₂, los reactivos de dicromato pueden usarse para una determinación precisa de DQO. Es importante tratar los viales usados como desechos peligrosos, ya que los desechos de mercurio deben reciclarse.

Libre de Mercurio - : Para quienes no deseen manipular reactivos de mercurio, nuestros reactivos "verdes" sin mercurio están disponibles para la determinación de DQO. Estos reactivos son más sensibles a las interferencias de cloruros, ya que no hay sulfato de mercurio. Si bien los reactivos sin mercurio son más fáciles de eliminar, pueden ser inaceptables para fines de informes.

ISO - : El método 15705 aprobado por ISO para la determinación de DQO también requiere el uso de sulfato de mercurio (HgSO₄) para reducir la interferencia del cloruro. Al contener reactivos químicos similares al método de la EPA, es importante tratar los viales ISO usados como desechos peligrosos, ya que los desechos de mercurio requieren reciclaje.

Método	Parámetro	Rango (cómo O ₂)	Resolu tion	Accura cy	Reage nt Code
--------	-----------	------------------------------------	----------------	--------------	---------------------

EPA	DQO RB	0 to 150 mg/L	1 mg/L	±5 mg/L ±5% of readin g	HI9475 4A-25
	DQO RM	0 to 1500 mg/L	1 mg/L	±15 mg/L ±4% of readin g	HI9475 4B-25
Dicromato	DQO RA	0 to 15000 mg/L	10 mg/L	±150 mg/L ±3% of readin g	HI9475 4C-25
Libre de Mercurio	DQO RB	0 to 150 mg/L	1 mg/L	±5 mg/L ±5% of readin g	HI9475 4D-25
	DQO RM	0 to 1500 mg/L	1 mg/L	±15 mg/L ±4% of readin g	HI9475 4E-25
ISO	DQO RB	0 to 150 mg/L	1 mg/L	±5 mg/L ±5% of readin g	HI9475 4F-25

DQO RM	0 to 1500 mg/L	1 mg/L	±15 mg/L ±4% of readin g	HI9475 4G-25
--------	----------------	--------	--------------------------------------	-----------------

ESPECIFICACIONES

Peso	0,65 kg
------	---------