

# Tester de pH inalámbrico HALO2 para Chocolate

SKU: HI 9810392

## RESUMEN

El pHmetro inalámbrico HALO2 está diseñado para ofrecer simplicidad y sofisticación en la medición de pH en una variedad de entornos y configuraciones.

- El Bluetooth de código abierto permite una fácil integración en los sistemas actuales de registro de datos.
- Protección resistente al agua con clasificación IP65.
- Electrodo especializado para verificaciones rápidas de pH.
- Equipado con todo lo necesario para realizar pruebas exitosas desde el primer momento.

## DESCRIPCIÓN

Diseñado para brindar simplicidad a las pruebas de pH, el medidor de pH HI 9810392 HALO2 está diseñado para usarse durante el proceso de elaboración del chocolate. La sonda incorporada presenta una unión de referencia abierta, punta de vidrio cónica y un diseño de funda extraíble.

- El Bluetooth de código abierto permite una fácil integración en los sistemas de registro de datos actuales

- Protección IP65 resistente al agua
- Electrodo especializado para control puntual
- Equipado con todo lo que necesita para realizar pruebas satisfactorias desde el primer momento

## ESPECIFICACIONES


<b>Nombre de especificación</b>	Detalle
<b>Referencia</b>	HI 9810392
<b>rango de pH</b>	0,00 a 12,00 pH
<b>Resolución de pH</b>	0,01 o 0,1 pH
<b>Exactitud del pH</b>	± 0.05 pH
<b>Rango mV</b>	Conversión de pH / mV
<b>Resolución mV</b>	0,1 o 1 mV
<b>Rango de temperatura</b>	0,0 a 60,0 ° C (32,0 a 140,0 ° F)
<b>Resolución de temperatura</b>	0,1 ° C; 0,1 ° F
<b>Exactitud de la temperatura</b>	± 0,5 ° C; ± 0,9 ° F
<b>Calibración</b>	Hasta tres puntos o cuatro puntos * Reconocimiento automático de tampones con tampones estándar Hanna (pH 1.68 *, 4.01, 7.01, 10.01) o NIST (pH 1.68 *, 4.01, 6.86, 9.18)

<b>Compensación de temperatura</b>	Automático (ATC) o Manual (MTC) *
<b>Electrodo</b>	Material del cuerpo - Vidrio de fluoruro de polivinilideno (PVDF) - Unión de baja temperatura (LT) - Celda de referencia abierta - Electrolito doble, Ag / AgCl - Gel (recargable) Punta / forma - Cónica, Ø 5 x 10 mm (Ø 0.19 x 0.39 ") Diámetro exterior - 12 mm (0,47 ") Longitud - 75 mm (2,95")
<b>Tipo de Batería</b>	Litio 3V - CR2032
<b>Duración de la batería</b>	Aproximadamente 1000 horas (500 horas con Bluetooth habilitado)
<b>Ambiente</b>	0 a 50 ° C (32 a 122 ° F)
<b>Caja</b>	Protección de ingreso IP65
<b>Dimensiones</b>	51 x 150 x 21 mm (2,0 x 5,9 x 0,8 ")
<b>Peso</b>	45 g (1,6 onzas)
<b>Notas</b>	* Disponible con la aplicación Hanna Lab ** Medir fuera del rango de temperatura de funcionamiento recomendado puede dañar el electrolito del gel y anular la garantía del producto. Nota: El comprobador puede mostrar medidas de -2,00 a 16,00 pH. Las mediciones fuera del rango de pH parpadearán. En este caso, evalúe la integridad del probador y el tipo de muestra medida.

## ACCESORIOS

**Suministrado con:** Solución tampón pH 4,01, sobre de 20 ml (2 uds.), solución tampón pH 7,01, sobre de 20 ml (2 uds.), Solución de limpieza y desinfección de electrodos para depósitos de chocolate, sobre de 20 ml (2 uds.), Solución de almacenamiento de electrodos, Frasco gotero de 13 ml (1 ud.), Electrolito puente gelificado, frasco gotero de 13 ml (1 ud.), Batería de litio de 3 V - CR2032, certificado de calidad del instrumento y manual de instrucciones.

## CÓMO PEDIR

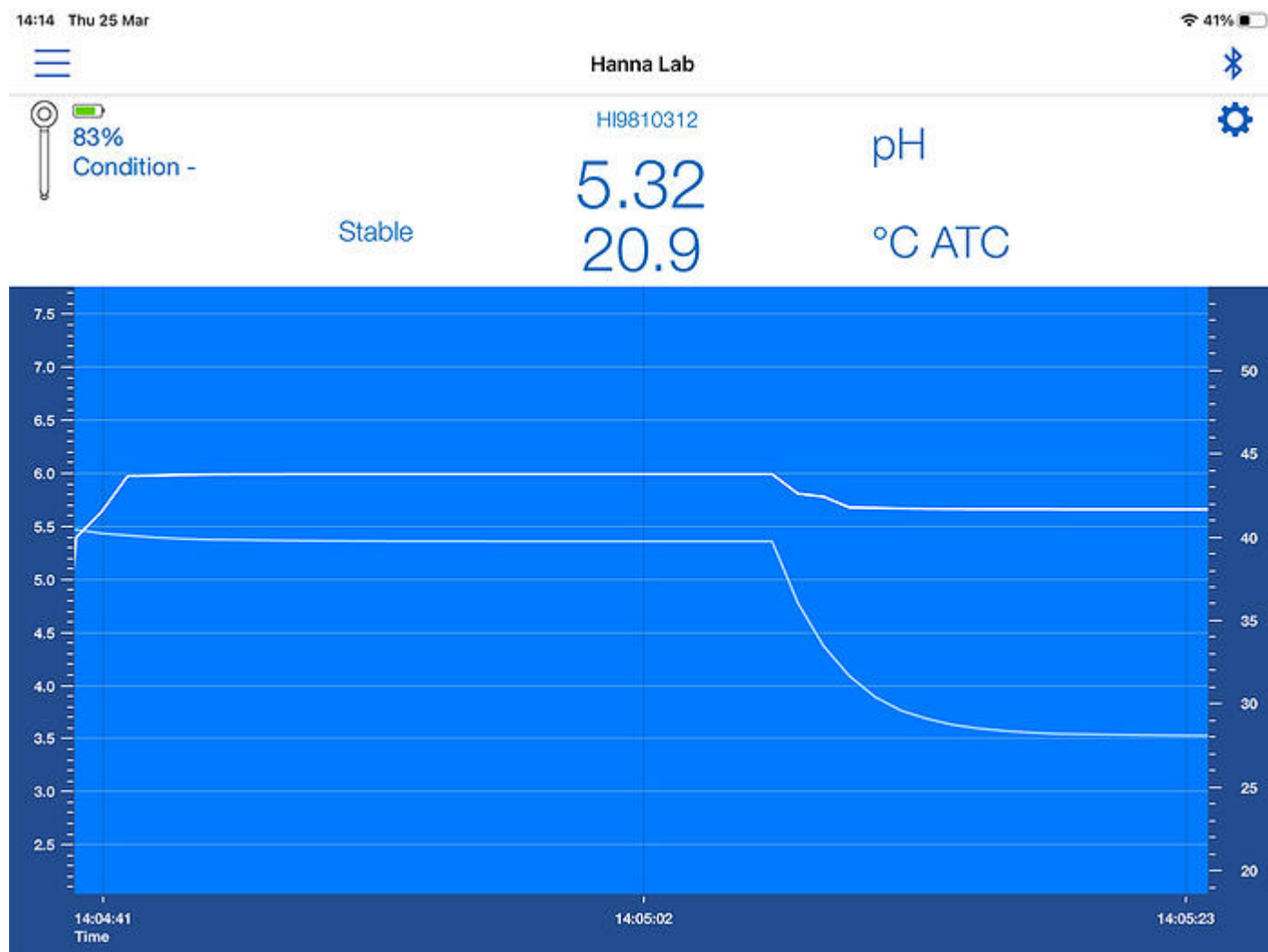

### Conectividad universal

El protocolo Bluetooth® de código abierto permite una fácil integración con la aplicación Hanna Lap y el sistema de gestión de información de laboratorio (LIMS) actual. El probador de pH inalámbrico Halo2 cumple con GLP.

### Protección IP65 resistente al agua

La carcasa del medidor de pH tiene una clasificación IP65, lo que significa que tiene un alto nivel de protección contra partículas y polvo, y protección contra la entrada de agua de chorros. Esto lo hace ideal para uso en exteriores.

### Tamaño de bolsillo

El tamaño compacto hace que el medidor de pH sea ideal para realizar pruebas sobre la marcha. Una gran pantalla LCD proporciona lecturas de un vistazo desde cualquier ángulo y la operación con un solo botón agiliza el proceso de prueba para cualquier usuario.



#### **Unión abierta única con funda extraíble**

Cuando las lecturas sean lentas, simplemente retire la funda para una limpieza rápida y un nuevo electrolito. Tener una sonda limpia con un electrolito de referencia nuevo mejorará el rendimiento y extenderá la vida útil del probador.

#### **Punta de vidrio cónica**

El diseño de la punta de forma cónica permite la penetración directa en los productos de chocolate y salsa.

#### **Cuerpo de PVDF**

El fluoruro de polivinilideno (PVDF) es un plástico duradero que es resistente a la mayoría de los productos químicos y disolventes utilizados para la desinfección en el sector alimentario, incluido el cloro (lejía).



### **Solución de limpieza para depósitos de chocolate**

Su probador de pH viene con una solución de limpieza que ha sido diseñada para mantener su electrodo libre de aceites y proteínas que se encuentran en chocolates y salsas. Esta combinación concentrada de detergentes limpia su comprobador de forma rápida y eficaz para que su comprobador se mantenga en óptimas condiciones.

### **Calibración fácil**

HALO2 se puede colocar directamente en nuestros sobres de tampón de calibración para facilitar la calibración. El uso de un sobre de calibración de Hanna asegura que su tampón esté siempre fresco.

### **Solución de almacenamiento**

El almacenamiento adecuado de su electrodo asegurará mediciones confiables y una larga vida útil del electrodo. Nuestra solución de almacenamiento está especialmente formulada para mantener hidratado el vidrio de pH mientras minimiza el crecimiento orgánico.

