
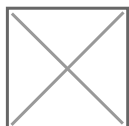


Reactivos para Checker HC de Magnesio Marino (25 pruebas) – HI783-25

SKU: HI 783-25

RESUMEN

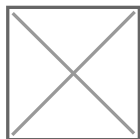

Los Reactivos para el Checker HC (Colorímetro Portátil) de Magnesio Marino HI783-25 son reactivos de alta calidad para usar con el Checker HC de Magnesio Marino (ppm) HI783. Los reactivos están claramente marcados con el número de lote y la fecha de vencimiento en cada paquete para su trazabilidad.

- Reactivos prefabricados para facilitar su uso
- Preparados con productos químicos de alta pureza
- Marcados con fecha de vencimiento y número de lote para la trazabilidad

DESCRIPCIÓN

Los HI 783-25 son los reactivos de reemplazo del Marine Magnesium Checker® HC - HI783. Estos reactivos de alta calidad se fabrican en nuestras instalaciones de última generación y están claramente marcados con el número de lote y la fecha de caducidad en cada paquete para su trazabilidad.

- Reactivos prefabricados para facilitar su uso
- Preparado con productos químicos de alta pureza.
- Marcado con fecha de caducidad y número de lote para trazabilidad

ESPECIFICACIONES

Referencia	HI 783-25
Nombre del producto	Reactivos Marine Magnesium Checker®
Cantidad de test	(25 pruebas)

ACCESORIOS

Los HI 783-25 son reactivos de alta calidad que se miden previamente, lo que permite a los usuarios lograr mediciones rápidas y precisas con su Marine Magnesium Checker® HC . Estos reactivos siguen el método colorimétrico EDTA utilizando el indicador calmagita en el que la reacción entre el magnesio y el reactivo provoca un tinte azul a violeta en la muestra . Simplemente agregando el paquete de reactivo HI783-25 a la muestra, la reacción tendrá lugar y el HI783 determinará la concentración a partir del color que se produce. Los resultados se mostrarán en ppm de magnesio. Estos reactivos están diseñados para usarse con muestras de agua salada que tienen un rango esperado de 1000 a 1800 ppm.

Los HI 783-25 son los reactivos de reemplazo del Marine Magnesium Checker® HC - HI783. Estos reactivos de alta calidad se fabrican en nuestras instalaciones de última generación y están claramente marcados con el número de lote y la fecha de caducidad en cada paquete para su trazabilidad.