

Estándares de Calibración para Medidor de Turbidez – HI847492-11

SKU: HI 847492-11



RESUMEN

Los Estándares de Calibración de Turbidez HI847492-11 proporcionan una solución simple para calibrar y validar el Medidor de Turbidez para Análisis de Calidad de Cerveza, HI847492. Los estándares de calibración de turbidez de Hanna se preparan a partir de materiales de referencia estándar trazables del NIST y se suministran con un Certificado de Análisis. El certificado de análisis proporciona el número de lote, los valores de referencia y la fecha de vencimiento para la trazabilidad al certificar el medidor de turbidez apropiado.

Suministrados con Certificado de Análisis

Valores Estándar de <0.1, 15, 100 y 800 FTU

Reutilizable con Larga Estabilidad de Vida útil

DESCRIPCIÓN


AutoSampler, Sistema Automatizado para manejo de Muestras para Titulador HI 902.

El HI 921 es un sistema de manipulación de muestras automatizado, diseñado para su uso con el sistema de valoración potencio-métrica HI 902C . Este sistema permite la valoración de alta calidad de múltiples muestras rápida y fácilmente.

El HI 921 puede utilizar hasta tres bombas peristálticas y la bomba de diafragma o la adición de reactivos, nivelando el residuo de la muestra y de vacío. También tiene una característica incorporada como agitador magnético, adición de reactivos, la opción de lavado de electrodo, interfaz USB compatible con código de barras y el lector de RFID incorporado para cada bandeja.

Con este sistema automático, hasta 18 muestras se pueden ejecutar de forma consecutiva. El AutoSampler HI 921 tiene comunicación directamente con el HI 902C para acceder a los métodos de valoración. Una vez que se estableció un método, el usuario puede personalizar la secuencia de la automatización de sus muestras para este método. Nombres y volumen de la muestra se pueden personalizar con valores predefinidos. Una vez que se completa la secuencia de este sistema automático, dos informes están disponibles para su revisión: un informe de secuencia con una tabla que define el nombre de cada muestra, la posición del vaso, el volumen de la muestra y el resultado de la bandeja; y un informe detallado de titulación para cada muestra individual, incluyendo un gráfico de los datos de valoración.

* Imagen Referencial de HI 902C y AutoSampler HI 921

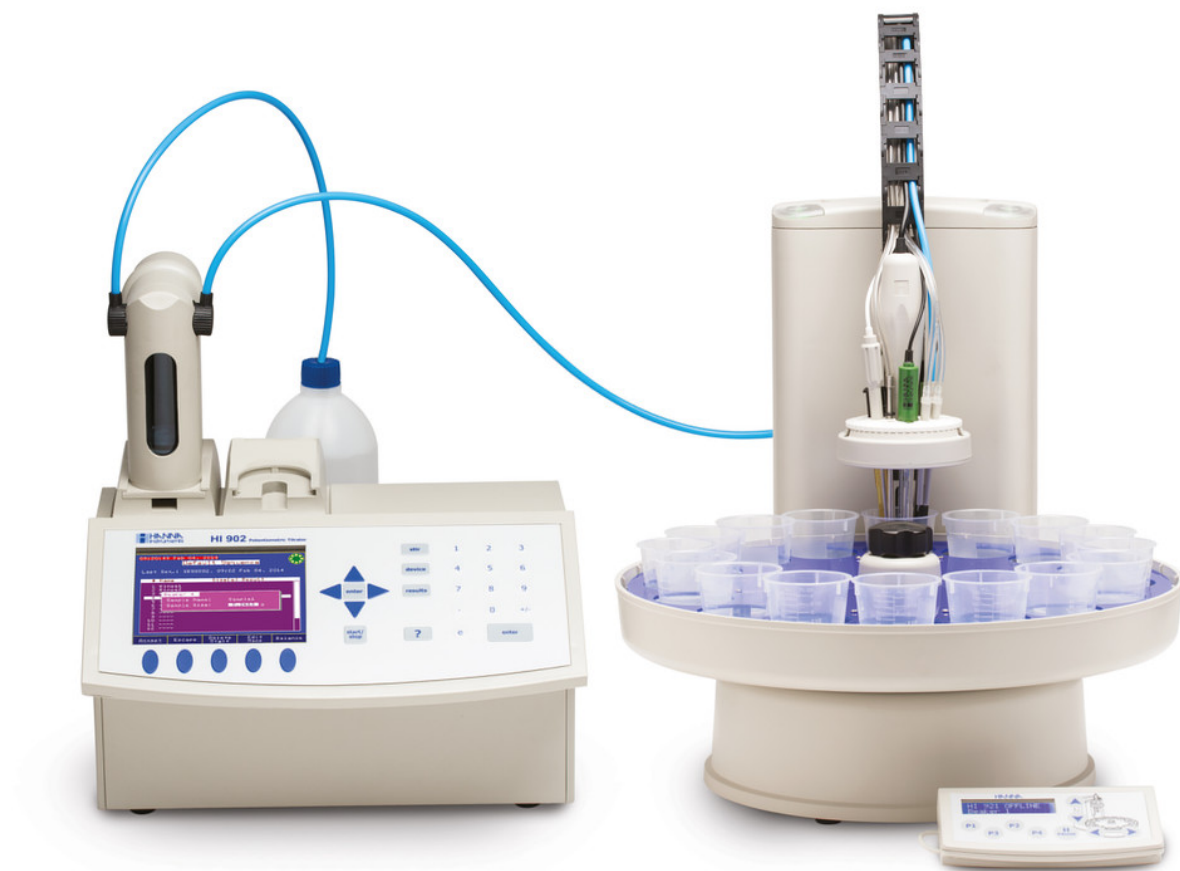

ESPECIFICACIONES

Accesorios de Apoyo	3 electrodos de 12 mm 1 sensor de temperatura 1 manguera de succión 5 accesorios de usos múltiples (valorante / tubos de reactivos) 1 agitador de hélice
Sensor de temperatura	HI-7662 (incluido)
Agitadores	Agitador magnético incorporado Agitador de hélice (Opcional)

Bombas Peristálticas	pueden instalarse en hasta 3 ranuras # 1, 2, 3 La bomba de membrana instalada en las ranuras # 4
Bomba Diafragma	para instalarse en las ranura # 4
Bandejas	16 x 150ml vasos (HI 920-11660) con RFID integrado que transmite el tipo y el número de serie de la bandeja al Autosampler 18 x 100ml vasos (HI 920-11853) con RFID integrado que transmite el tipo y el número de serie de la bandeja al Autosampler
Vasos	HI 920-060 (150 ml) vasos de plástico que se ajustan a la placa HI 920-11660 HI 920-053 (100 ml) vasos de plástico que se ajustan a la junta HI 920-11853
Panel de control	Teclas para la operación manual del tablero, operación manual de las bombas peristálticas o diagrama, Pantalla 2 líneas con información de luz de fondo y el estado
Lector de código de barras	Compatible con lectores de código de barras USB que utilice para añadir nombre a los muestras.
Grabacion de Informes	Hasta 40 por bandeja de muestras. (Ej 720 detalles para una bandeja de 18 muestras.)

ACCESORIOS

- **HI 920-11660** Bandeja de fila individual con RFID, 16 posiciones de vasos de precipitados de diámetro 60mm
- **HI 920-060** Vasos de plástico para HI 920-11660 (20)
- **HI 920-11853** Bandeja de fila individual con RFID, 18 posiciones de vasos de precipitados de diámetro 53mm
- **HI 920-053** Vasos de plástico para HI 920-11853 (20)
- **HI 920-301** Agitador de hélice
- **HI 920-101** Bomba peristáltica con tubo de dispensación
- **HI 920A102** Bomba peristáltica con tubo de aspiración
- **HI 920-201** Tapa de la bomba de reemplazo y rotor peristáltico
- **HI 920-202** Conjunto de tubo con un tubo de plástico para la bomba peristáltica de dispensación
- **HI 920-203** Kit de tubería con tubo de aspiración en acero inoxidable para la bomba peristáltica
- **HI 920A204** Tubo de rodillo para la bomba peristáltica (3)
- **HI 920A111** Bomba de diafragma con un tubo
- **HI 920-212** Conjunto de tubos para bomba de diafragma
- **HI 920-290** Tubo TYGON de 5mm
- **HI 920-280** Tubo de dispensación del titulante para autosampler / Bureta con 1.5mm

- **HI 920-302** Hélices de repuesto (3)
- **HI 920-303** Hélices de repuesto de alta resistencia química (3)
- **HI 920-310** Soporte para tres electrodos
- **HI 920-900** USB de memoria externa (Pen)
- **HI 920-921** Panel de control para HI 921
- **HI 920-930** CableComunicación Titulador / AutoSampler
- **HI 920-931** Cable de Extensión BNC (1m)
- **HI 920-932** Cable Extensión de referencia (1m)
- **HI 920-960** Tornillo de tablero
- **HI 7662A** Sensor de temperatura para Autosampler con cable de 1,5 m
- **HI731319** Barras magnéticas 10x 25mmx7mm

CÓMO PEDIR

HI921-XY AutoSampler

X es el número de bombas peristálticas (0-3)

Y es el número de bombas de diafragma (0-1)

HI921-10 Sistema Automatico con 1 bomba peristáltica

HI921-20 Sistema Automatico con 2 bombas peristálticas

HI921-30 Sistema Automatico con 3 bombas peristálticas

HI921-01 Sistema Automatico con 1 bomba de diafragma

HI921-11 Sistema Automatico con 1 bomba peristáltica y 1 bomba de diafragma

HI921-21 Sistema Automatico con 2 bombas peristálticas y 1 bomba de diafragma

HI921-31 Sistema Automatico con 3 bombas peristálticas y 1 bomba de diafragma